


ColsigenreFresh™

Directions for use / Instrucciones de uso / Mode d'emploi



VEGAN

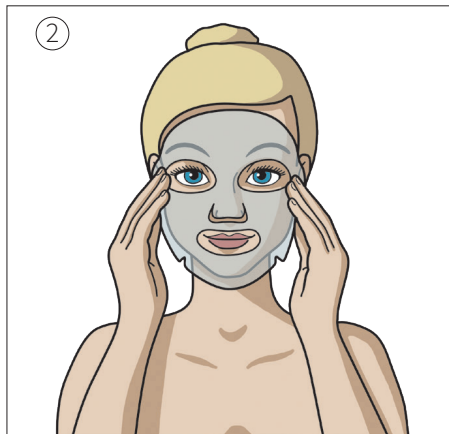

FRAGRANCE-FREE

5 single-use masks,
0.84 fl oz (25mL) each

5 mascarillas de un solo uso,
0.84 fl oz (25mL) cada una

5 masques à usage unique,
0.84 fl oz (25mL) chacun

Scan me!



us.colsigen.com

 **Stratpharma** Switzerland
Heal Better™

CF000US00PI01-0725

[EN] Consumer information

Colsigen Refresh is a restorative face mask formulated with Humanized Type III Collagen.

Colsigen Refresh soothes, deeply hydrates, and rejuvenates sensitive or compromised skin, repairing the damage from cosmetic procedures and daily environmental stresses.

How Colsigen Refresh works?

This mask, designed with advanced fabric technology to conform to facial contours, helping to create a barrier that moisturizes evenly and ensures comfort during use.

Colsigen Refresh supports the skin's natural moisture barrier and repair processes by delivering hydration to areas of skin that are dry, irritated, or visibly compromised. It promotes a soothing environment that helps reduce redness and discomfort post-procedure.

Colsigen Refresh is gentle enough for everyday use.

Intended purpose (intended use)

Colsigen Refresh is a transient protective barrier, which improves hydration and supports skin repair.

Indications

Intended to be used daily or as needed on all types of skin. Indicated for dry, irritated and compromised skin. Indicated for use following cosmetic procedures such as laser resurfacing, microdermabrasion, microneedling and superficial peels.

Intended users

Colsigen Refresh is indicated for adults, children, and people with sensitive skin.

Contra-indications

- Not for use by individuals allergic to any of the ingredients.
- Not suitable for highly exuding or infected wounds.

Warnings and precautions

- For external use only.
- Avoid contact with the eyes.
- If irritation occurs, discontinue use and consult your physician.
- Do not use if the package is damaged.
- Do not use after the expiration (EXP) date printed on the sachet.

Ingredients: Mask: 100% plant fiber. Gel:

Purified water, Glycerin, Recombinant type III Humanized Collagen, Carbomer, Methylparaben, Disodium EDTA, Triethanolamine

[ES] Información para el consumidor

Colsigen Refresh es una mascarilla facial restauradora formulada con colágeno humanizado tipo III.

Colsigen Refresh calma, hidrata en profundidad y rejuvenece la piel sensible o comprometida, reparando los daños causados por procedimientos cosméticos y el estrés ambiental diario.

¿Cómo funciona Colsigen Refresh?

Esta mascarilla está diseñada con tecnología avanzada de tejido que se adapta a los contornos faciales, ayudando a crear una barrera que hidrata de manera uniforme y proporciona confort durante su uso.

Colsigen Refresh apoya la barrera natural de humedad de la piel y sus procesos de reparación, proporcionando hidratación en áreas secas, irritadas o visiblemente comprometidas. Promueve un entorno calmante que ayuda a reducir el enrojecimiento después de procedimientos cosméticos.

Colsigen Refresh es lo suficientemente suave para su uso diario.

Propósito previsto (uso previsto)

Colsigen Refresh es una barrera protectora transitoria que mejora la hidratación y apoya la reparación de la piel.

Indicaciones

Indicada para uso diario o según sea necesario en todo tipo de piel. Indicada para piel seca, irritada y comprometida. Indicada para uso después de procedimientos cosméticos como resurfacing con láser, microdermabrasión, microneedling y peelings superficiales.

Usuarios previstos

Colsigen Refresh está indicada para adultos, niños y personas con piel sensible.

Contraindicaciones

- No debe ser utilizado por personas alérgicas a alguno de sus ingredientes.
- No apto para heridas altamente exudativas o infectadas.

Advertencias y precauciones

- Solo para uso externo.
- Evite el contacto con los ojos.
- Si se presenta irritación, suspenda el uso y consulte a su médico.
- No usar si el envase está dañado.
- No usar después de la fecha de caducidad (CAD) impresa en el sobre.

Ingredients: Mascarilla: 100% fibra vegetal.

Gel: agua purificada, glicerina, colágeno humanizado recombinante tipo III, carbómero, metilparabeno, EDTA disódico, trietanolamina

[FR] Informations consommateurs

Colsigen Refresh est un masque facial réparateur formulé avec du collagène humanisé de type III.

Colsigen Refresh apaise, hydrate en profondeur et rajeunit les peaux sensibles ou fragilisées, en réparant les dommages causés par les procédures cosmétiques et les agressions environnementales quotidiennes.

Comment fonctionne Colsigen Refresh ?

Ce masque, conçu avec une technologie de tissu avancée, s'adapte aux contours du visage, contribuant à créer une barrière qui hydrate uniformément et assure un grand confort pendant l'utilisation.

Colsigen Refresh soutient la barrière d'hydratation naturelle de la peau et les processus de réparation en apportant une hydratation aux zones de la peau qui sont sèches, irritées ou visiblement compromises. Il favorise un environnement apaisant qui aide à réduire les rougeurs et l'inconfort post-procédure.

Colsigen Refresh est suffisamment doux pour une utilisation quotidienne.

Objectif prévu (utilisation prévue)

Colsigen Refresh est une barrière protectrice transitoire qui améliore l'hydratation et favorise la réparation de la peau.

Indications

S'utilise quotidiennement ou selon les besoins sur tous les types de peau. Indiqué pour les peaux sèches, irritées et fragilisées. Indiqué pour une utilisation après des procédures cosmétiques telles que le resurfage au laser, la microdermabrasion, le microneedling et les peelings superficiels.

Utilisateurs prévus

Colsigen Refresh est indiqué pour les adultes, les enfants et les personnes ayant une peau sensible.

Contre-indications

- Ne pas utiliser pour les personnes allergiques à l'un des ingrédients.
- Ne convient pas aux plaies très exsudatives ou infectées.

Avvertissements et précautions

- A usage externe uniquement.
- Évitez le contact avec les yeux.
- En cas d'irritation, cessez l'utilisation et consultez votre médecin.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Ne pas utiliser après la date de péremption (EXP) imprimée sur le sachet.

Ingédients : Masque : 100% fibres végétales.

Gel : Eau purifiée, Glycérine, Collagène humanisé recombinant de type III, Carbomer, Methylparaben, Disodium EDTA, Triethanolamine



Medical device
Dispositivo médico
Dispositif médical



Consult instructions for use
Consultar instrucciones de uso
Consultez le mode d'emploi



Keep out of the reach of children
Mantener fuera del alcance de los niños
A conserver hors de portée des enfants



Use by date
Fecha de caducidad
Date limite d'utilisation



Do not use if the package is damaged
No usar si el envase está dañado
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Sterilized using irradiation
Esterilizado mediante irradiación
Stérilisé par irradiation



Single sterile barrier system
Sistema de barrera estéril simple
Système de barrière stérile unique



Do not re-use
No reutilizar
Ne pas réutiliser



Batch code
Código de lote
Numéro de lot



Date of manufacture
Fecha de fabricación
Date de fabrication



Stratpharma AG, Aeschenvorstadt 57, CH-4051 Basel, Switzerland / Suiza / Suisse

Date of preparation of this information /
Fecha de preparación de esta información /
Date de préparation de cette information:
06/2025