
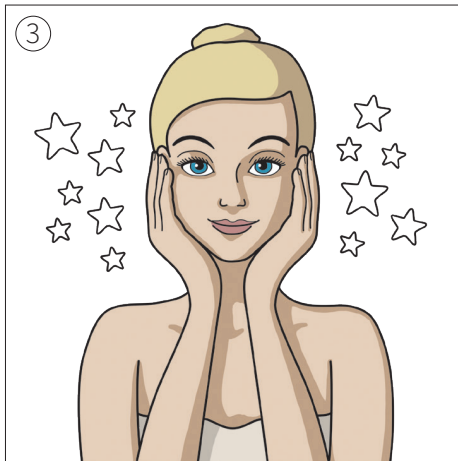


Directions for use / Instrucciones de uso / Mode d'emploi

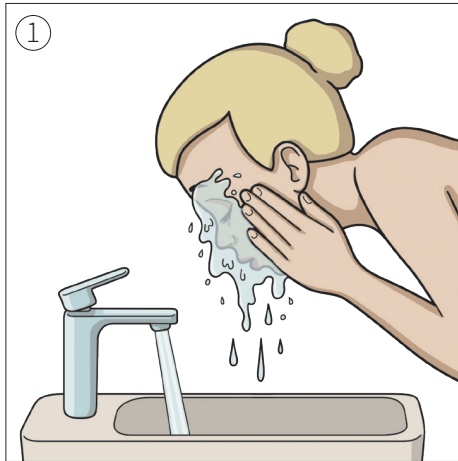

us.colsigen.com

MD

Medical device
Dispositivo médico
Dispositif médical



Consult instructions for use
Consultar instrucciones de uso
Consulter le mode d'emploi



Keep out of the reach of children
Mantener fuera del alcance de los niños
A conserver hors de portée des enfants



Use by date
Fecha de caducidad
Date limite d'utilisation



Do not use if the package is damaged
No usar si el envase está dañado
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

STERILE

Sterilised using aseptic processing techniques
Esterilizado mediante técnicas de procesamiento aséptico
Stérilisé par des techniques de traitement aseptique



Single sterile barrier system
Sistema de barrera estéril simple
Système de barrière stérile unique

LOT

Batch code
Código de lote
Numéro de lot



Date of manufacture
Fecha de fabricación
Date de fabrication



Stratpharma AG,
Aeschenvorstadt 57, CH-4051 Basel,
Switzerland / Suiza / Suisse



Complies with airline regulations (TSA 3-1-1) for carry-on luggage during air travel.
Cumple con las regulaciones de las aerolíneas (TSA 3-1-1) para el equipaje de mano durante los viajes en avión.
Conforme aux réglementations des compagnies aériennes (TSA 3-1-1) pour les bagages à main lors des voyages en avion.

Date of preparation of this information / Fecha de preparación de esta información / Date de dernière mise à jour des informations: 06/2025



HUMANIZED
TYPE III
COLLAGEN

Colsigen
Mist™



VEGAN



FRAGRANCE-FREE

3.4 fl oz
(100 mL)

CM000US00PI01-0725

Stratpharma Switzerland
Heal Better™

[EN] Consumer information

Colsigen Mist is a restorative mist formulated with Humanized Type III Collagen.

Colsigen Mist soothes, deeply hydrates, and rejuvenates sensitive or compromised skin, repairing the damage from cosmetic procedures and daily environmental stresses.

How Colsigen Mist works?

Colsigen Mist assists hydration to facial contours by creating a barrier that helps to distribute moisture evenly while ensuring comfort during use.

This mist is powered by nitrogen technology, making it plane safe and free from butane or other flammable gases.

Colsigen Mist supports the skin's natural moisture barrier and repair processes by delivering hydration to areas of skin that are dry, irritated, or visibly compromised. It promotes a soothing environment that helps reduce redness and discomfort post-procedure.

Colsigen Mist is gentle enough to be used throughout the day, as needed.

Intended purpose (intended use)

Colsigen Mist provides a transient barrier that hydrates and supports the skins repair.

Indications

Indicated to be used daily or as needed on all types of skin.

Indicated for dry, irritated and compromised skin.

Indicated for use following cosmetic procedures such as laser resurfacing, microdermabrasion, microneedling and superficial peels.

Intended users

Colsigen Mist is indicated for adults, children, and people with sensitive skin.

Contra-indications

- Not for use by individuals allergic to any of the ingredients.
- Not suitable for highly exudating or infected wounds.

Warnings and precautions

- External use only.
- Avoid contact with the eyes.
- If irritation occurs, discontinue use and consult your physician.
- Do not use if the package is damaged.
- Do not use after the expiration (EXP) date printed on the can.

Ingredients: Purified Water, Glycerin, Sodium dihydrogen phosphate, Recombinant type III Humanized Collagen, Methylparaben, Sodium chloride, Phenoxyethanol

[ES] Información para el consumidor

Colsigen Mist es una bruma restauradora formulada con colágeno humanizado tipo III.

Colsigen Mist calma, hidrata en profundidad y rejuvenece la piel sensible o comprometida, reparando los daños causados por procedimientos cosméticos y el estrés ambiental diario.

¿Cómo funciona Colsigen Mist?

Colsigen Mist favorece la hidratación en los contornos faciales al crear una barrera que ayuda a distribuir la humedad de manera uniforme, brindando comodidad durante su uso.

Esta bruma utiliza tecnología a base de nitrógeno, lo que la hace segura para viajar en avión, y libre de butano u otros gases inflamables.

Colsigen Mist apoya la barrera natural de humedad de la piel y sus pro-

cesos de reparación, proporcionando hidratación en zonas secas, irritadas o visiblemente comprometidas. Promueve un entorno calmante que ayuda a reducir el enrojecimiento y la incomodidad después de procedimientos cosméticos.

Colsigen Mist es lo suficientemente suave para usarse a lo largo del día, según sea necesario.

Propósito previsto (uso previsto)

Colsigen Mist proporciona una barrera transitoria que hidrata y favorece la reparación de la piel.

Indicaciones

Indicado para uso diario o según sea necesario en todo tipo de piel.

Indicado para piel seca, irritada y comprometida.

Indicado para su uso después de procedimientos cosméticos como resurfacing con láser, microdermabrasión, microneedling y peelings superficiales.

Usuarios previstos

Colsigen Mist está indicado para adultos, niños y personas con piel sensible.

Contraindicaciones

- No utilizar en personas alérgicas a alguno de los ingredientes.
- No apto para heridas infectadas o con exudado abundante.

Advertencias y precauciones

- Solo para uso externo.
- Evite el contacto con los ojos.
- Si se presenta irritación, suspenda el uso y consulte a su médico.
- No usar si el envase está dañado.
- No utilizar después de la fecha de caducidad (CAD) impresa en el envase.

Ingredientes: Agua purificada, glicerina, fosfato de sodio diácido, colágeno humanizado recombinante tipo III, metilparabeno, cloruro de sodio, fenoxietanol

[FR] Informations consommateurs

Colsigen Mist est une brume réparatrice formulée avec du collagène humanisé de type III.

Colsigen Mist apaise, hydrate en profondeur et rajeunit les peaux sensibles ou fragilisées, en réparant les dommages causés par les procédures cosmétiques et les agressions environnementales quotidiennes.

Comment fonctionne Colsigen Mist ?

Colsigen Mist contribue à l'hydratation des contours du visage en créant une barrière qui aide à répartir uniformément l'humidité tout en assurant le confort pendant l'utilisation.

Cette brume est actionnée par une technologie fonctionnant à l'azote, ce qui la rend sûre et exempte de butane ou d'autres gaz inflammables.

Colsigen Mist soutient la barrière naturelle d'hydratation de la peau et les processus de réparation en apportant de l'hydratation aux zones de la peau qui sont sèches, irritées ou visiblement compromises. Elle crée un environnement apaisant qui contribue à réduire les rougeurs et l'inconfort post-procédure.

Colsigen Mist est suffisamment doux pour être utilisé tout au long de la journée, selon les besoins.

Objectif prévu (utilisation prévue)

Colsigen Mist constitue une barrière transitoire qui hydrate et favorise la réparation de la peau.

Indications

Indiqué pour une utilisation quotidienne ou selon les besoins sur tous les types de peau.

Indiqué pour les peaux sèches, irritées et fragilisées.

Indiqué pour une utilisation après

des procédures cosmétiques telles que le resurfaçage au laser, la microdermabrasion, le microneedling et les peelings superficiels.

Utilisateurs prévus

Colsigen Mist est indiqué pour les adultes, les enfants et les personnes ayant une peau sensible.

Contre-indications

- Ne pas utiliser par les personnes allergiques à l'un des ingrédients.
- Ne convient pas aux plaies très exsudatives ou infectées.

Avertissements et précautions

- A usage externe uniquement.
- Évitez le contact avec les yeux.
- En cas d'irritation, cessez l'utilisation et consultez votre médecin.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Ne pas utiliser après la date de péremption (EXP) indiquée sur l'aérosol.

Ingédients : Eau purifiée, glycérine, dihydrogénophosphate de sodium, collagène humanisé recombinant de type III, méthylparabène, chlorure de sodium, phénoxyéthanol